

Lipolisis Láser

MHP LIGHT-LASER

Lipolisis Láser

MHP LIGHT-LASER



EFEECTO Lipolítico
EFEECTO Reafirmante
EFEECTO Drenante
EFEECTO Antiestrías
FÁCIL de Aplicar
SIN Riesgo



DISTRIBUIDOR:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo acoplado en un mueble con ruedas.
- Cuatro aplicadores refrigerados con 2 diodos MHP Light por aplicador de 10 Watios de potencia cada diodo. Longitud de onda 630 nanómetros.
- Un manipulador con 4 diodos láser de 100 mW de potencia cada diodo. Longitud de onda 650 nanómetros.
- Pantalla LCD manipulada mediante encoder.
- Duración efectiva de los diodos MHP Light: Más de 20.000 horas.
- Duración efectiva de los diodos láser: Más de 20.000 horas.
- Alimentación: 100 a 240 Vol.
- Consumo: 80 W.



S A M K O

LIPÓLISIS
INDUCIDA
POR
LA ENERGÍA
FOTÓNICA



S A M K O




MHP LIGHT-LASER



¿QUÉ ES LIPO RED?

El **Lipo Red** es un equipo de última generación de clase 3B, no invasivo y sin efectos secundarios. Combina **Diodos de Luz Monocromática de Alta Potencia (MHP Light)** que emiten en la banda del rojo, en una longitud de onda de 630 nanómetros, con un manipulador de **Diodos Láser** que emiten también en la banda del rojo, en una longitud de onda de 650 nanómetros.

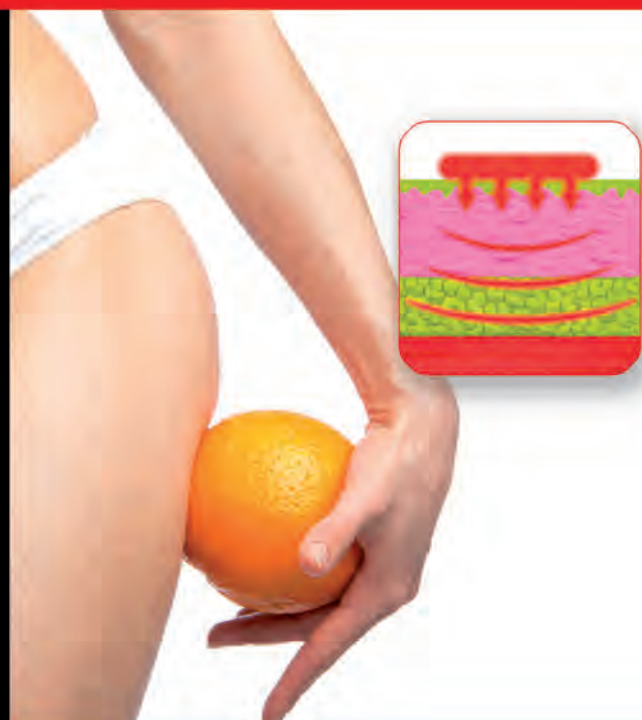

EFFECTO Drenante

Con la emisión monocromática en la banda del rojo se ha constatado un notable efecto drenante, mejorando los estados de éstasis venoso, responsables entre otras alteraciones de la celulitis o lipodistrofia. En los días posteriores a la sesión suele haber un incremento de la diuresis con eliminación de los residuos del catabolismo de las grasas y pérdida de peso.



RESULTADOS DESDE LA PRIMERA SESIÓN HASTA 6 CM DE REDUCCIÓN DE PERÍMETRO EN UNA SESIÓN.

En un estudio comparativo se ha podido constatar que el **Lipo Red** tiene un efecto reductor sobre áreas afectadas de adiposidad localizada dos veces superior al láser frío que utilizan otros equipos, con pérdidas de contorno en el abdomen de hasta 6 cm. en una sesión. Esto es posible gracias a la energía liberada en un mínimo tiempo (5 a 20 minutos) por los diodos **MHP Light** de 10 Watts (10.000 mW) de potencia cada uno y con una longitud de onda de 630 nanómetros, en la banda del rojo, que parece ser la idónea para conseguir un efecto lipolítico.

La energía fotónica emitida por el **Lipo Red** produce una degradación de los triglicéridos almacenados dentro de los adipocitos, en glicerol y ácidos grasos libres, de menor peso molecular, los cuales son liberados y fácilmente metabolizados por el organismo. Aunque se pueden conseguir resultados en las primeras sesiones, para afianzar los mismos es aconsejable llevar una dieta equilibrada, beber al menos dos litros de agua al día y hacer algo de ejercicio (caminar, hacer gimnasia, practicar algún deporte, etc.) o bien combinar el tratamiento con sesiones de electroestimulación muscular, con el fin de mejorar el drenaje y aumentar el gasto calórico.

SIN RIESGOS

El **Lipo Red** actúa estimulando el metabolismo celular de forma natural, no hay riesgo de quemaduras ni produce efectos destructivos sobre ningún tejido, es por tanto un equipo totalmente seguro sin contraindicaciones ni efectos secundarios, debiendo únicamente proteger los ojos de una exposición directa con gafas protectoras y evitar el tratamiento en pieles fotosensibles.



EFFECTO Reafirmante cutáneo y antiestrías

La energía fotónica liberada por los diodos **MHP-Light** en la **franja del rojo**, actúa sobre las mitocondrias celulares activando la síntesis de ATP, lo que se traduce en el caso de la piel en un aumento de la producción de fibroblastos, fibras colágenas y elásticas y disminución de la colagenasa, que aumenta con la edad, cuyo resultado es una mejoría de la cicatrización de heridas, estrías recientes y elasticidad cutánea.



TRATAMIENTO Facial Laser

- Piel envejecida.
- Cutis más terso y firme.
- Se puede realizar solo facial o mientras se realiza el tratamiento corporal.

FÁCIL DE APLICAR

Inicialmente se colocan los diodos **MHP Light** en las zonas a tratar. La colocación es fácil y cómoda. Incorpora 8 diodos **MHP Light** repartidos en cuatro aplicadores (dos diodos en cada aplicador). Con los cuatro aplicadores se trabaja un abdomen completo en un tiempo de entre 10 y 15 minutos o las dos piernas en el mismo tiempo. Posteriormente se utiliza el manipulador de diodos **láser** para irradiar de forma más puntual los ganglios linfáticos durante unos cinco minutos más y así mejorar el drenaje linfático. El tiempo total de una sesión oscila entre 10 y 30 minutos. Se suele realizar una sesión por semana y un total de 5 a 10 sesiones por tratamiento.

